




Længdejustering af forreste QR-aksel

Sørg for, at den er korrekt justeret af sikkerhedsmæssige årsager!

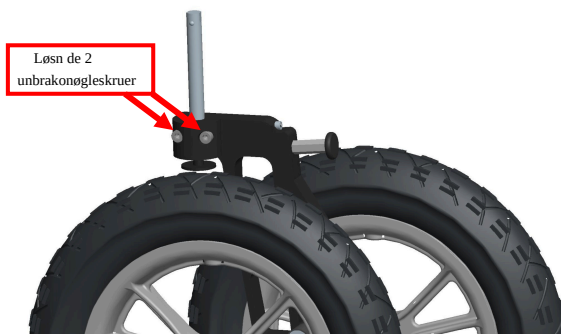

1. Løsn de 2 unbrakoskruer, og skub QR-akslen ned gennem gafflen, indtil den store akselmøtrik er synlig.



2. Juster længden på QR-akslen med 11 mm og 19 mm skruenøgler. Hold QR-akslen fast i enden med 11 mm skruenøglen for at forhindre den i at rotere. Juster møtrikken med 19 mm skruenøglen. Hvis akslen ikke låser fast i stedet, er det tilstrækkeligt at skrue møtrikken $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ omdrejning mod uret.
3. Spænd de 2 gaffelskruer igen for at fastgøre QR-akslen til gafflen, og prøv at fastgøre forhjulsophængen til stedet. Bekræft, at den er helt låst på plads.

Hvis du har spørgsmål, bedes du ringe til vores kundesupport: +46-8-522 100 50