




## Comfort Folding Stool - Brugermanual

3-benet komfortklapbar skammel - Sædehøjde 55 cm -  
Kompakt, let og nem at tage med udendørs - Inklusive  
bæretaske - Maks. belastning 225 kg

Scan QR-koden med din smartphone eller enhed  
for at se videoinstruktioner.

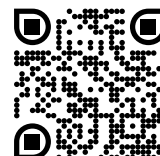

- Comfort-foldeskamlen følger dig overalt.
- Den er kompakt nok til at have med i din taske, og den kan nemt foldes sammen.
- Du kan hurtigt forlænge benene og folde den ud, og den er stabil næsten overalt.
- Behagelig at sidde på – til en velfortjent hvile på din daglige gåtur udendørs, når du arbejder i haven, fisker eller venter i den uendelige kø.
- Comfort-foldeskamlen hjælper med at beskytte din ryg, knæ og led.
- Comfort Folding Stool fås i forskellige højder med forskellige sædestørrelser; 55XL, 65XXL og 75XXL.



- 1 Fold skamlen ud.
- 2 Træk benene ud, og sørg for, at de røde låseknapper er i den korrekte position, og at de er synlige efter at have trukket teleskopbenene ud.
- 3 Comfort foldeskammelen er nu klar til brug i sin normale sædehøjde.
- 4 For at folde skamlen efter brug skal du trykke på den røde knap og skubbe teleskopbenet tilbage i sin ikke-udstrakte position og folde skamlen sammen.



- 5 Comfort Folding Stool tilbyder to sædehøjder. Når du for eksempel arbejder i havearbejde i lav højde, kan du sidde på foldeskammelen uden at trække teleskopbenene ud.



- ⑥ For at låse de nederste ben, når Comfort Foldeskammelen er foldet sammen, skal du dreje benene, så de er låst af gummifødderne, der er tæt sammen. For at bruge Comfort Foldeskammelen skal du gøre det modsatte, og du kan låse de nederste ben op.



- ⑦ Den kan nemt foldes sammen, så den passer i bæretasken. Klar til den næste hvile og eventyr.

### Hvis du har "Steady" stabilitetsstropper til Comfort Folding Stool



De stabile stropper øger sikkerheden og stabiliteten af Comfort Folding Skammel på bløde overflader som sand eller blød jord.

- ① De tre fastgørelsespunkter på Steady kan flyttes, så de passer til størrelsen på din Comfort Folding Stool.
- ② 2.Juster fastgørelsespunkterne til deres korrekte position.
- ③ Sæt foldeskammelens fødder i lommerne på Steady.



Forkert brug af Comfort-klapstolen kan resultere i personskade eller skade. Kontroller altid Comfort-klapstolen, før du bruger den, for at sikre dig, at den røde låseknop er i den korrekte position.

Vær forsigtig, når du sidder på Comfort Foldable-skamlen på ujævnt underlag. Undgå kun at trykke på et eller to ben på Comfort Foldable-skamlen, når du sidder ned.

**Comfort Folding Stool er en svensk opfindelse og den eneste 3-benede foldeskammelen i verden med teleskopben, patenter og varemærkebeskyttelse. Den er let, kompakt og tilbyder en overlegen siddekomfort.**

**Producent :**

Scandinavian Touch AB  
Lindhagsgatan 5C  
531 40 Lidköping  
SWEDEN  
+4651025555