

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Veloped



Gebruiksaanwijzing

Beste gebruiker,

Hartelijk dank dat u voor dit product heeft gekozen! Wij hopen natuurlijk van harte dat u plezier zult hebben van de Trionic Veloped en dat deze u menig goede ervaring zal bezorgen, zowel in de stad als daarbuiten.

Door uw keuze voor een Trionic Veloped zult u profiteren van vele nieuwe voordelen en het zal uw toegang tot verschillende buitenomgevingen vergemakkelijken. Hopelijk zal het ook de kwaliteit van uw leven verhogen.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door en volg alle instructies op, met name de veiligheidsvoorschriften.

De Veloped is met name gemaakt voor gebruik buitenshuis.



Trionic Veloped

De Veloped heeft een uniek 3-wiel ontwerp, maar zoals u ziet heeft het in feite vier wielen. Het is bedoeld als loophulpmiddel, vooral voor mensen die de behoefte hebben om fysiek actief te zijn buiten de deur. Ontworpen met als doel om te wandelen en de mobiliteit van de gebruiker te verhogen, is de Veloped uniek in z'n soort. De voornaamste eigenschap is het dubbele voorwiel waarmee u obstakels tot 13 cm hoog kunt overwinnen. De kracht die u nodig heeft om lagere obstakels te bedwingen is, in vergelijking met een traditioneel wiel, eveneens verlaagd. Het 3-wiel ontwerp verhoogd, in combinatie met de voorwielophanging en de luchtbanden, het comfort en de mobiliteit op elke oneffen ondergrond.

De Veloped is getest volgens de internationale ISO-norm 11199-2:2005 en is goedgekeurd voor een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg.

Het product

Technische gegevens

	12er M	12er L	14er M	14er L
Min. hoogte	75 cm	82 cm	77 cm	84 cm
Max. hoogte	95 cm	102 cm	97 cm	104 cm
Breedte	76 cm	79 cm	76 cm	79 cm
Lengte	102 cm	102 cm	107 cm	107 cm
Zittingshoogte	58 cm	63 cm	60 cm	65 cm
Zittingsbreedte	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Wielmaat	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm	14"/36cm
Afmeting opgeklapt	L106xW42xH75 cm	L106xW42xH82 cm	L111xW42xH77 cm	L111xW42xH84 cm
Afmeting opgeklapt zonder wielen	L84xW42xH59 cm	L84xW42xH68 cm	L84xW42xH59 cm	L84xW42xH68 cm
Gewicht (zonder tassen)	12,3 kg	13,0 kg	12,8 kg	13,5 kg
Gewicht zonder wielen	7,2 kg	7,9 kg	7,2 kg	7,9 kg
Max. gebruikersgewicht	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

Veiligheid

- Beide remmen dienen vergrendeld te zijn voordat u de zitting gebruikt.
- Zorg ervoor dat de Veloped helemaal uitgeklast is voordat u gaat wandelen.
- Ben extra voorzichtig op steile hellingen of oneven terrein.
- De stabiliteit van de Veloped is getest met een gewicht van 5kg in het mandje. Zorg ervoor dat, wanneer u meer gewicht in het mandje plaatst, dat u deze gelijkmatig verdeelt in het mandje.

Veloped stoel & mandje

Stoelhoes

De stoel is bedekt met waterafstotend en waterbestendig 600D polyester materiaal. Het kan eenvoudig, door middel van drukknoppen, over de stoel worden geplaatst. Op de hand wassen op 30°C.

Mandje

De mand heeft een ritsvakje, ideaal voor het opbergen van waardevolle spullen zoals portemonnees, sleutels of een kleine handtas. Het mandje is gemaakt van een waterafstotend of waterbestendig 600D polyester stof en wordt met behulp van drie stukjes klitterband vastgezet. In het ritsvakje bevindt zich een kleine regenhoes die u over de spullen in het mandje kunt trekken. Op de hand wassen op 30°C.



Bij het eerste gebruik

1. Plaats de achterwielen op de achterste as door de zwarte knoppen in het midden van het wiel in te drukken en, daarna, de as helemaal door het asgat te schuiven. Laat de drukknop los.


2. Controleer of de wielen stevig vastzitten door ze zijwaarts te trekken.

3. Maak op dezelfde manier de voorwielophanging vast aan de voorzijde van het frame door middel van het indrukken van de zwarte knoppen aan de

onderkant van de as en de as vanaf onderen door het asgat te duwen. Laat de drukknoppen daarna los.

4. Controleer of het voorwiel stevig vastzit door het frame van de grond op te tillen en het wiel naar beneden te trekken.

5. Stel de hoogte van de handgrepen in zoals is beschreven in het hoofdstuk <<*Handgrepen instellen*>>

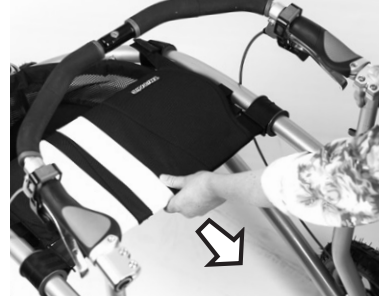

Wandelinstelling





1. Klap de Veloped uit door de handgrepen van elkaar weg, naar buiten toe te trekken.

2. Controleer of de Veloped zich in de wandelstatus heeft vergrendeld. Luister goed of u hoort dat de telescoopstang zich vastklikt.

3. De stoel kan zowel naar voren- als naar achteren schuiven. Duw het voorwaarts om maximale wandelruimte te hebben.

Trek de stoel naar achteren voordat u de stoel gebruikt, iets uit het mandje wilt pakken of de Veloped wilt opvouwen.



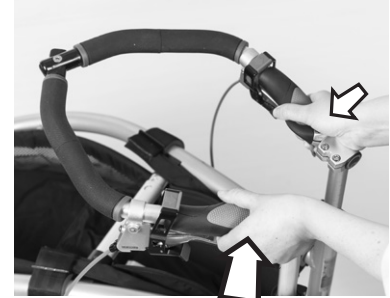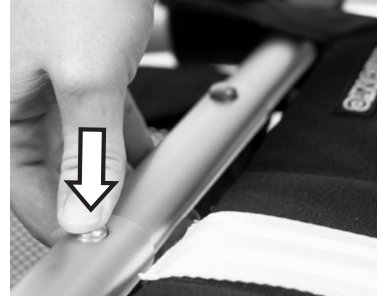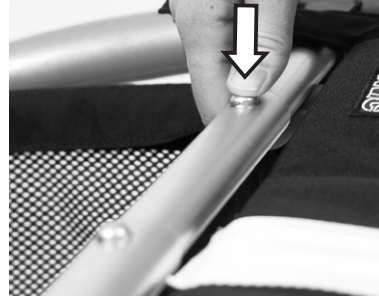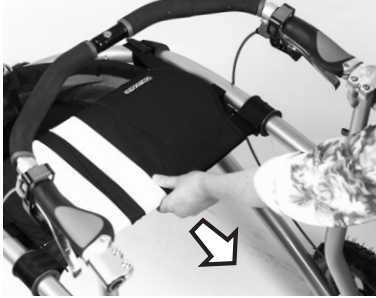

De Veloped opvouwen


1. Trek de stoel naar achteren

2. Druk de knop rechts op de telescoopstang in.

3. Til en vouw tegelijkertijd het ene deel van het frame tegen het andere deel.

4. Druk de andere knop links op de telescoopstang in.

5. Til en vouw tegelijkertijd het ene deel van het frame tegen het andere deel om zo de Veloped helemaal op te vouwen

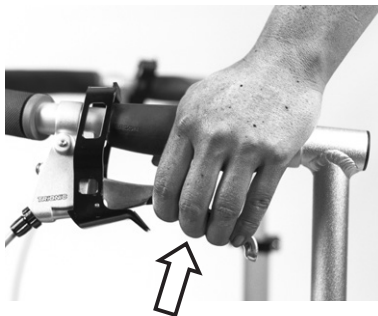

Rijrem


Trek de remhendel omhoog om de rijrem te activeren. Rem met beide remmen tegelijk.



Parkeerrem


U kunt de parkeerrem op 3 verschillende manieren activeren.

Optie 1: Duw de onderste rode parkeerrem met uw wijsvinger naar beneden terwijl u, tegelijkertijd, de remhendel aantrekt. Stel vast dat de parkeerrem werkt en dat de Veloped zich niet beweegt.

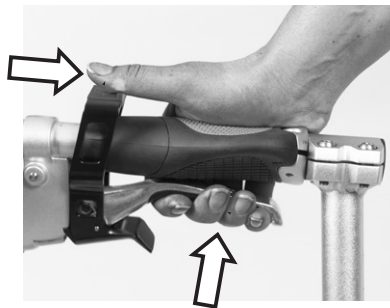


Optie 2: trek de bovenste rode parkeerrem met uw duim naar boven toe terwijl u, tegelijkertijd, de rem aantrekt. Stel vast dat de parkeerrem werkt.

Optie 3: Gebruik beide handen. Trek de bovenste rode parkeerrem met één hand naar achteren toe terwijl u met uw andere

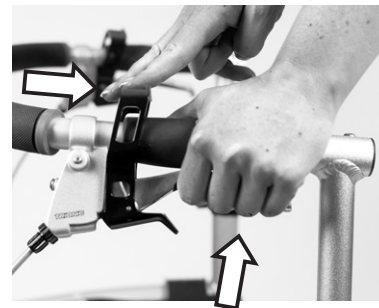

hand de rem aantrekt. Stel vast dat de parkeerrem werkt.

Om de parkeerrem te ontkoppelen die u op dezelfde manier te remmen als dat u met de rijrem.

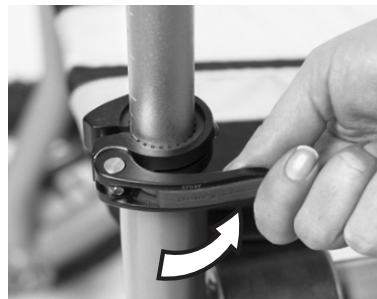

Instellen van de handgreep

1. Ontgrendel beide snel-ontkoppelingen door ze naar buiten toe te vouwen.
2. Stel de handgreep af op de gewenste hoogte. Het beste is op polshoogte vanaf de grond, wanneer u staat en uw armen

loshangen. Vraag om hulp bij het opmeten!
OPMERKING: de eenvoudigste manier om de handgreep in te stellen is wanneer u zit op de stoel; zodoende kunt u de streepjes zie die de hoogte aangeven . Dat zal het instellen van de hoogte vereenvoudigen.

3. Vergrendel beide snel-ontkoppelingen door de hendel naar binnen toe te vouwen.

LET OP! Gebruik de snel-ontkoppelaars niet als vleugelmoeren of schroeven. De snel-ontkoppelaars kunnen vervangen worden door schroeven en moeren wanneer de vrees bestaat dat de gebruiker de snel-ontkoppelaars per ongeluk zal openen tijdens het gebruik.



Afstellen van de handgreep

De hoek van de handgrepen kan worden aangepast zodat uw handen comfortabel geplaatst kunnen worden en u een optimale ondersteuning heeft.

1. Draai de schroef aan de achterkant van de handgreep los met een 4mm inbussleutel.
2. Draai/roteer de handgreep in de door u gewenste hoek.

3. Draai de schroef aan de achterkant van de handgreep vast met een 4mm inbussleutel.





Remmen vergrendelen

1. Wanneer de remmen niet goed functioneren, draai dan de instellingsschroef los op elke remhendel (tegen de klok in) en breng ze terug in positie door de schroef vast te draaien. U doet dit door de schroef naar de hendel toe te draaien (met de klok mee).

Neem contact op met uw verkoper, of de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhouden van uw Trionic Veloped, wanneer de remmen nog steeds slecht functioneren.



Plaatsen van de achterwielen

De achterwielen kunnen worden verwijderd om het vervoer van de Veloped te vereenvoudigen.

1. Druk, om het wiel te verwijderen, de zwarte knop midden op het wiel in en trek het wiel los.

2. Om het wiel vast te maken drukt u de zwarte knop midden op het wiel in en duwt u de wielas door het asgat. Laat de knop pas los wanneer het wiel op de juiste positie is.

3. Houd de band vast en duw/trek aan het wiel om vast te stellen dat het wiel stevig vast zit.

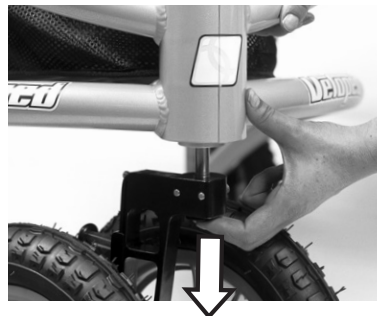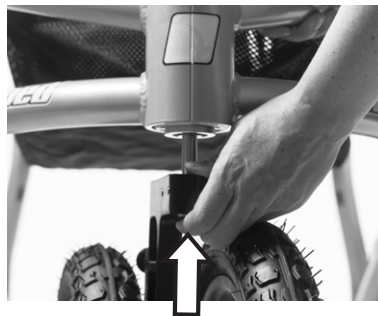

Het voorwiel verwijderen/installeren

De voorwielophanging is verwijderbaar zodat u de Veloped eenvoudig kunt transporteren.

1. Druk de zwarte knop onder het voorste scharnier in zodat de voorwielophanging los kan komen.

2. Verwijder de gehele ophanging, til het voorste frame van de grond terwijl u de wielophanging naar beneden trekt.

3. Om de wielophanging te installeren dient u de voorzijde op te tillen, de zwarte knop in te drukken en de wielas door

het asgat onder het frame te duwen. Laat de zwarte knop los. Controleer of de voorwielophanging goed vast zit door de voorzijde van het frame op te tillen en te proberen de ophanging naar beneden te trekken.

Luchtdruk

Controleer de luchtdruk in de band regelmatig. Trionic raadt een luchtdruk van 1,5 – 2,0 bar aan.

Maximale luchtdruk in de band is 2,5 bar / 35 psi.



Instellingen van het voorwiel wijzigen: stadsgebruik / off-road gebruik

Lagere positie:

Maakt eenvoudig draaien mogelijk terwijl de klimcapaciteiten behouden blijven.

Bovenste positie:

Biedt verbeterde klimmogelijkheden, betere ophanging op oneven oppervlaktes en een

hogere directionele stabiliteit.

Draai het voorwiel 180 graden zodat u eenvoudig bij de instelingsgrendel kunt komen.

1. Pak het linkerwiel vast met uw linkerhand en til de Veloped een klein beetje van de grond.

2. Terwijl u de Veloped omhoog houdt met uw linker hand grijpt u met uw rechterhand de zwarte knop met de groene stippen en trekt u deze naar buiten toe (naar u toe).

3. Schuif de insteller (aan de rechterkant) naar beneden of

naar boven. Het is belangrijk dat u de insteller helemaal naar beneden of naar boven trekt.

4. Laat de zwarte knop los zodat deze terug kan springen en het voorwiel kan vastzetten in de door u gewenste positie.



Afnemen/Aanbrengen van de mand

De mand van de Trionic Veloped kan 22kg bevatten. Het heeft een klein ritsvakje aan de achterkant. Hier kunt uw waardevolle spullen en kleine items in opbergen. De Veloped mand kan worden verwijderd en deze is met behulp van klittenband aan de mandrail van het frame bevestigd.

1. Steek de beide klittenbandflapjes van onderaf tussen het frame en de mandrail door. Buig ze daarna naar binnen en maak de klittenbandjes aan de binnenkant van de mand vast.

2. Bevestig het voorste klittenbandflapje op dezelfde manier.
3. Indien nodig maak de klittenband opnieuw vast totdat het mandje stevig vast zit.

LET OP! Zorg ervoor dat de plastic plaat onderin het mandje eerst wordt geplaatst voordat u het mandje aan het frame vast maakt.



Afnemen/Aanbrengen van zittingovertrek

De verplaatsbare zitting van de Veloped bestaat uit een basiszitting en een afneembare overtrek die met negen drukknoppen is bevestigd.

1. Pak de overtrek met de tekst Trionic aan de rechterkant beet. Steek de lange flap tussen de telescoopstang en de basiszitting.

2. Druk de drie voorste drukknoppen van de lange flap vast op de basiszitting.

3. Maak vervolgens de drie drukknoppen van de korte flap vast op de basiszitting.

4. Zet tenslotte de drie laatste drukknoppen van de lange flap vast aan de korte flap.

Veiligheidsvoorschriften

Controleer voor gebruik of de Trionic Veloped perfect werkt:

- Controleer de remfunctie en de parkeerrem.
- Zorg er voor dat het frame is gezeurd in de uitgeklapte wandelpositie.
- Controleer of de handgreep de juiste hoogte heeft en of deze goed is vergrendeld.
- Vermijd bij uitklappen aanraking met het voorste scharnier vanwege het risico van beknelling.
- Het maximumgewicht van de gebruiker mag niet hoger zijn dan 150 kg.
- Gebruik de Trionic Veloped niet als rolstoel of voor personenvervoer.
- De Trionic Veloped is bedoeld als loophulpmiddel, dat vooral beoogt de gebruiker steun te bieden bij fysieke verplaatsing.
- Om een goed functioneren van het product te garanderen raden wij u aan dit jaarlijks bij een door Trionic of de distributeur goedgekeurde servicepunt te laten nazien.
- Een defecte Veloped mag niet worden gebruikt.

Onderhoudsvoorschriften

Om een goede werking en de veiligheid te garanderen moet u erop toezien dat het onderstaande regelmatig wordt uitgevoerd:

- Maak de Veloped schoon met gewoon afwasmiddel, water en een theedoek. Droog hem goed af.
- Houd de wielen schoon met afwasmiddel, water en een kunststof borstel.
- Controleer of schroeven en hendels goed zijn aangedraaid.
- Als uw Veloped niet in perfecte conditie verkeert moet u direct contact opnemen met de verkoper/dealer of service vertegenwoordiger om uw Trionic Veloped te laten onderhouden.

Trionic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ingrepen aan het product (aanpassingen, ondeugdelijke reparaties) die zonder voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.

Garantie

De Trionic Veloped komt met 10 jaar garantie, met uitzondering van de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (banden, buizen, remblokkjes, remkabels, remkabelbehuizing en onderdelen van textiel). De garantie gaat in op het moment van aanschaf en is alleen van toepassing op originele Trionic delen.

Serie nummer

Datum / Stempel / Handtekening

CE - Trionic Sverige AB garandeert dat bovengenoemd product voldoet aan de relevante bepalingen van de wet (1993:584) inzake medisch-technische producten alsmede aan de eisen in de voorschriften (LVFS 2003:11) inzake medisch-technische producten. Daarmee voldoet het product aan de vereisten van EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende medisch-technische producten.

Label

De Veloped is getest en goedgekeurd volgens de voorgeschreven internationale norm voor loophulpmiddelen: ISO 11199-2:2005 «Wandel hulpmiddelen bediend met beide armen».

Het maximum gewicht van de gebruiker bedraagt 150 kg.

The label is rectangular with rounded corners and contains the following information:

- Fabrikant:** TRIONIC
- Address:** Seminariegatan 29 C, SE-752 28 Uppsala, SWEDEN
- Contact:** www.trionic.se, info@trionic.se, Tel.: +46 8 522 100 50, Fax.: 08-522 100 59
- Max. gebruikersgewicht:** Max Weight: 150 kg
- Breedte:** Width: 76 cm
- Lengte:** Length: 102 cm
- Max. en Min. hoogte:** Height: 75-94 cm
- Productiedatum:** 2010-02
- Serie nummer:** SN: 201202-000138
- Safety:** Primarily for outdoor use (ISO 11199.2:2005)
- Barcode:** EAN 13: 7 350038 031419
- Product code:** EAN 13
- Artikelnummer:** ART no: 11-00-011
- Approval:** Hulpmiddel goedgekeurd volgens 93/42/EEC

At the bottom, there are three logos: the CE mark, a circular logo with a person and a cane, and a circular logo with the letter 'S'.

Milieuvriendelijkheid

De Trionic Veloped is zo gemaakt, dat de negatieve effecten op het milieu tijdens zijn levenscyclus zo gering mogelijk zijn. Als de levensduur van het product erop zit, kan het tot schroot worden verwerkt en kunnen de delen gerecycled worden.

- Bij de recycling worden de aluminiumcomponenten van het product gescheiden van de overige onderdelen. De onderdelen worden gesorteerd in metaal, kunststof en restmateriaal.
- • Het product bestaat voor het grootste deel uit aluminium, staal en kunststof.
- • Voorbeelden van componenten die uit restmateriaal bestaan zijn remhendels, wielen en handgreep.
- • Omdat verschillende gemeenten/recyclingbedrijven anders omgaan met recyclingmateriaal, is het raadzaam in twijfelgevallen contact op te nemen met uw gemeente.

Trionic Sverige AB is aangesloten bij het "The Green Dot", een landelijk systeem voor de recycling van verpakkingen.

Problemen verhelpen

Als uw Trionic Veloped niet naar tevredenheid mocht werken: voer, om de problemen te verhelpen, eerst een controle uit met behulp van onderstaande richtlijnen. Als deze richtlijnen niet helpen bij het verhelpen van het probleem, kunt u contact opnemen met uw wederverkoper, servicepunt of met distributeur of met Trionic Zweden AB.

Probleem: De zitting zakt te ver door, hij is te laag.

Mogelijke oorzaak: Het achterste klittenband onder de zitting moet worden aangespannen of de Trionic Veloped is niet goed uitgeklat.

Maatregel: Verwijder de zittingovertrek en span het klittenband van de zitting terwijl de Veloped is uitgeklat. Span het klittenband niet te strak aan, omdat de zitting dan lastig heen en weer te schuiven is.

Probleem: Rem functioneert slecht.

Mogelijke oorzaak: Het remvlak is versleten of de kabel is enigszins opgerekt.

Maatregel: Stel de kabelspanning van de rem af volgens de paragraaf «Afstellen van de rem» hierboven.

Probleem: Moeite met sturen.

Mogelijke oorzaak: Het voorwiel is ingesteld op onregelmatig terrein / bovenste positie.

Maatregel: Wijzig de instelling van de voorwielophanging naar de eenvoudig draaien status/ laagste positie zoals staat beschreven in het hoofdstuk <<Verander de instellingen van het voorwiel>>

Probleem: De voor- of achterwielen zitten niet goed vast.

Mogelijke oorzaak: Het wiel is niet juist vastgemaakt.

Maatregel: Controleer of de drukknop goed vergrendelt. Neem contact op met uw servicepunt als het wiel niet goed op zijn plaats vergrendelt.

TRiONiC

Trionic Sverige AB

Seminariegatan 29 C
SE-752 28 Uppsala
ZWEDEN

www.trionic.be

info@trionic.se

Telefoon: +46 8 522 100 50
Fax: +46 8 522 100 59

Corp.ID: 556698-1527. BTW Reg. No SE556698152701