Manual: Udskiftning af Trionic Walker ryglænsrem




1 Skru skruen, der holder remmen, løs med en 3 mm unbrakonøgle.

Gentag på den modsatte side.



2 Sørg for at du får skruen, møtrikken og den rørformede afstandsholder tilbage.

.

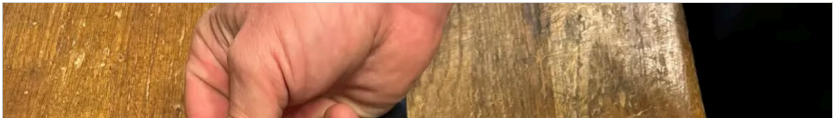

Manual: Udskiftning af Trionic Walker ryglænsrem



5 Sæt den nye erstatningsrem i polstringen.

VIGTIGT: Sørg for at justere enden af remmen med TRIONIC-logoet som vist på billedet.



6 Indsæt den rørformede afstandsstykke i hullet for enden af stroppen.

.

